

D

Gebrauchsanweisung

Rollator XXL und Rollator XXL mit Arthritisarmauflagen

GB

Instructions for Use

Rollator XXL and Rollator XXL including Arthritis-Armrests

F

Mode d'emploi

Rollator XXL et Rollator XXL Arthritique

NL

Gebruikshandleiding

Rollator XXL en de Rollator XXL met armsteunen voor mensen met artritis



 **DIETZ**[®]
REHA-PRODUKTE

Reutäckerstrasse 12
D-76307 Karlsbad-Ittersbach
Tel. +49 (0) 7248/ 9186 - 0
Fax. +49 (0) 7248/ 9186 - 86
info@dietz-reha.de

CE

Rollator XXL und Rollator XXL mit Arthritisarmauflagen
Gebrauchsanweisung Version 4.0.0
Stand 03/2015 _ LW

Allgemeines

Für den hier beschriebenen Rollator XXL und den Rollator XXL mit Arthritisarmauflagen (im folgenden Verlauf nicht weiter benannt) ist die Konformität gemäß der EG-Richtlinie 93/42, für Medizinprodukte, erklärt. Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Lieferumfangs. Sie ist beim Benutzer bereitzuhalten und bleibt auch bei Weitergabe des Produktes beim Produkt. Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber den in dieser Gebrauchsanweisung dargestellten Ausführungen behalten wir uns vor. Nachdrucke, Übersetzungen und Vervielfältigungen in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Herstellers. Das Urheberrecht liegt beim Hersteller. Diese Gebrauchsanweisung unterliegt keinem Änderungsdienst. Den jeweils aktuellen Stand erfahren Sie bei uns.

Indikation und Verwendungszweck

Der Rollator XXL dient bewegungseingeschränkten Personen mit max. 200 kg Körpergewicht als Gehhilfe und eingeschränkt auch als Sitzgelegenheit zum vorübergehenden Ruhen.

Der unter der Sitzfläche eingehängte Drahtkorb ist zur Ablage und zum Transport von Gegenständen oder Waren vorgesehen.

Der Rollator XXL darf nur auf festem und ebenem Untergrund verwendet werden.

Die Benutzung zu anderen Zwecken, insbesondere die Verwendung als Aufstieghilfe oder zum Transportieren schwerer Lasten ist bestimmungswidrig und gefährlich!

Aufstellen / Entfalten des Rollators

- Positionieren Sie den Rollator vor sich in Fahrrichtung.
- Betätigen Sie die Feststellbremsen.
- Halten Sie den Rollator mit der einen Hand am Handgriff.
- Drücken Sie mit der anderen Hand den Sitz nach unten bis er spürbar einrastet.
- Hängen Sie den Korb von vorn am Rahmen ein.



Falten des Rollators


- Nehmen Sie den Korb vom Rahmen ab.
- Positionieren Sie den Rollator in Fahrrichtung vor sich und betätigen Sie die Feststellbremsen.
- Halten Sie den Rollator mit der einen Hand am Handgriff.
- Lösen Sie mit der anderen Hand den Sitz mit einem Ruck aus der Verankerung.
- Nun ziehen Sie den Rollator ganz zu sich heran.
- Zum Verstauen des Rollators können Sie die Rückenlehne und die Schiebegriffe demontieren.



Rollator XXL

Schiebegriffe einstellen


- Betätigen Sie als Erstes die Feststellbremse.
- Lösen Sie die Verschraubung und nehmen Sie die Befestigungsschrauben ganz heraus.
- Positionieren Sie die Schiebegriffe in der korrekten Höhe (Empfehlung: Die Schiebegriffe sollten sich in Höhe des Handgelenks befinden)
- Anschließend sind die Befestigungsschrauben wieder einzusetzen und mit der Sternmutter festzuziehen.

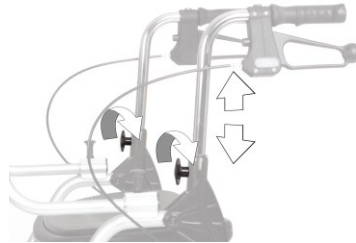

Achten Sie darauf, dass die Schrauben komplett in der Bohrung versinken und fest arretieren. Zum Verstauen des Rollators können Sie die Schiebegriffe auch ganz aus dem Rahmen herausnehmen.

Arthritisauflagen einstellen


Bitte gehen sie für die Höhenverstellung der Arthritisauflagen wie beim Einstellen der Schiebegriffe vor.

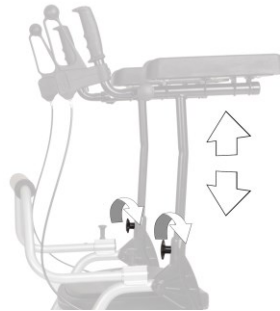

Griffweite einstellen

Die Griffweite lässt sich stufenweise einstellen.


- Betätigen Sie als Erstes die Feststellbremsen.
- Lösen Sie die Verschraubung und nehmen Sie die Befestigungsschrauben ganz heraus.
- Positionieren Sie die Handgriffe in der für Sie angenehmen Griffweite.
- Anschließend sind die Befestigungsschrauben wieder einzusetzen und mit der Sternmutter festzuziehen.

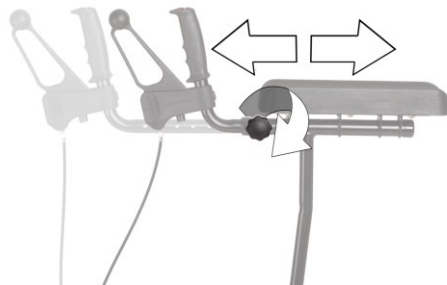

Rückenlehne befestigen

- Ziehen Sie zuerst die Zugschnäpper mit einer leichten Drehung nach oben, sodass sie die Arretierung freigeben.
- Schieben Sie die Rückenlehne in die Bohrungen.
- Betätigen Sie nun die Zugschnäpper, sodass diese vollständig einrasten.
- Bei der Demontage gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Zum Verstauen des Rollators können Sie die Rückenlehne auch separat lagern.

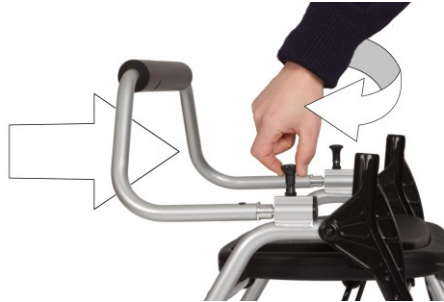

Betriebs- und Feststellbremse

- Die Bremse wird als Betriebsbremse (beim Schieben) durch Ziehen des Bremshebels nach oben betätigt.
- Durch Drücken des Hebels nach unten wird die Bremse als Feststellbremse (beim Parken) verwendet.



Vergewissern Sie sich vor jeder Inbetriebnahme, dass die Betriebs- und Feststellbremse korrekt eingestellt ist und einwandfrei funktioniert.

Bremseinstellung

- Die Bremswirkung kann direkt am Bremshebel oder am Bowdenzug eingestellt werden.
- Die Bremse ist korrekt eingestellt, wenn die Bremshebel wie auch die Bowdenzüge kein Spiel aufweisen und die Räder sich ohne Schleifgeräusche drehen lassen.



Sicherheitshinweise

- Hängen Sie keine Taschen an die Griffe.
- Beim Benutzen auf abschüssigen Wegen benutzen Sie die Betriebsbremse.
- Benutzen Sie den Rollator nur auf ebenen horizontalen und festen Untergrund.
- Beim starken Aufstützen auf die Handgriffe kann der Rollator nach hinten kippen.
- Beim Zusammenklappen des Rollators XXL können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden.
- Bitte beachten Sie, dass sich Polsterteile, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind aufheizen und bei Berührung Hautverletzungen verursachen können. Decken Sie daher diese Teile ab oder schützen Sie den Rollator vor Sonneneinstrahlung.

Reinigung

Die Reinigung und Desinfektion sollten Sie in regelmäßigen Abständen (bei Benutzerwechsel zwingend erforderlich) durchführen. Zur Reinigung verwenden Sie eine milde Seifenlauge. Die Desinfektion können Sie mit handelsüblichen Mitteln durchführen. Verwenden Sie keine Dampfstrahlergeräte und keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel!

Wartung

Der Rollator XXL ist wartungsfrei. Wenn Sie ein Nachlassen der Bremsen, Schwergängigkeit der Räder oder andere Funktionseinschränkungen feststellen ist der Rollator für eine Instandsetzung dem Fachhandel zu übergeben.

Lieferumfang

- Rollator XXL
- Einkaufskorb
- Rückenbügel
- Gebrauchsanweisung

Garantie

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und bezieht sich auf alle Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Technische Daten

Maximale Zuladung:	200 kg / 3kg Einkaufskorb
Leergewicht (mit Einkaufskorb):	12,6 kg inkl. Einkaufskorb
Gesamtbreite:	710 mm
Gesamttiefe:	730 mm
Gesamthöhe:	820 – 925 mm
Wenderadius:	1360 mm
Abstand zwischen den Handgriffen:	640 mm
Sitzhöhe:	540 mm
Verstellungen:	Schiebegriff: 820 - 920 mm (5-fach verstellbar)
Bereifung:	Ø 200 x 30 mm, pannensicher

Rollator XXL and Rollator XXL including Arthritis-Armrests

Instructions for Use



Reutäckerstrasse 12
D-76307 Karlsbad-Ittersbach
Tel. +49 (0) 7248/ 9186 - 0
Fax. +49 (0) 7248/ 9186 – 86
info@dietz-reha.de



Rollator XXL and Rollator XXL including Arthritis-Armrests
Instructions of Use Version 4.0.0
Status 03/2015 _ LW

General

Compliance with EC Directive 93/42 for medical products is confirmed for the Rollator XXL and the Rollator XXL including Arthritis-Armrests (further not specific named) described in the following. These instructions for use are part of the scope of delivery. The user must store these instructions in a safe place and keep them with the product if it is passed on to another user. We reserve the right to alterations due to technical developments compared to the design described in the instructions for use. Reproduction, translations and copies in any form, including extracts, require written approval from the manufacturer. The manufacturer is owner of copyright. These instructions for use are not subject to an amendment service. We will provide you with the current status, on request.

Indication and Purpose of Use

The Rollator XXL serves as a walking support for persons with mobility disorders and max. 200 kg body weight and also as a seat for temporary rest. The wire basket suspended beneath the seat is for storage and transporting items and goods. The Rollator XXL must only be used on solid, even ground. Use for other purposes, especially as a set-up or to transport heavy loads is inappropriate and dangerous!

Setting up / Unfolding the Rollator

- Position the rollator in front of you in the direction of motion.
- Actuate the locking brake.
- Hold the rollator with one hand on the handle.
- With the other hand, press the seat down until you feel it lock in place.
- Fasten the back rest.
- Hang the basket in the frame from the front.




Folding the rollator

- Remove the basket from the frame.
- Position the rollator in front of you in the direction of motion and actuate the locking brake.
- Hold the rollator with one hand.
- With the other hand, firmly remove the seat from its bracing.
- Now pull the rollator together.
- You can dismantle the back rest and the push handles for better storage.



Setting the push handles


- First actuate the locking brake.
- Unscrew the screws and remove the fastening screws.
- Position the push handles at the correct height (recommended: push handles should be at the height of your wrists).
- Replace the fastening screws and tighten the star grip nuts.

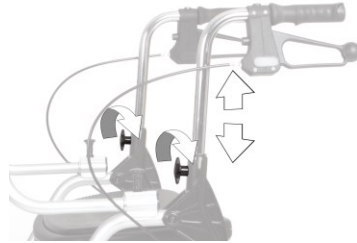

Make sure the screw sinks completely into the drilling hole.
You can remove the push handles completely from the frame for better storage.

Setting the Arthritis-Armrests


For the setting of the Arthritis-Armrests please operate identical as for the setting of the push handles.

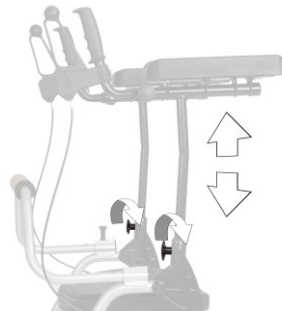

Setting the grip handle distance

The distance of the grip handles can be adjusted stepwise.


- First actuate the locking brake.
- Unscrew the screws and remove the fastening screws.
- Position the grip handles at the position which is comfortable for you.
- Replace the fastening screws and tighten the star grip nuts.

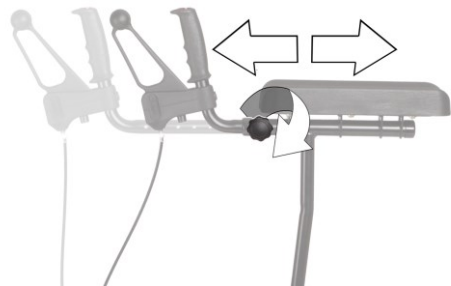

Rollator XXL

Fastening the back rest

- Pull the snap locks upwards with a slight twist so that the lock is released.
- Push the back rest into the drilling holes.
- Now actuate the snap locks so that they lock in completely.
- For dismantling, proceed in reverse order. You can store the back rest separately when storing the rollator.

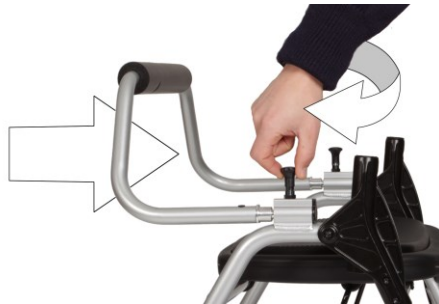

Operating and Locking brake

- The brake is used as an operating brake (when pushing) by pulling the brake lever upwards.
- By pushing the lever downwards, the brake is used as a locking brake (for parking)



Please make sure that the operating and locking brake are correct adjusted and are working flawless before using the rollator.

Setting the brakes

- The braking force can be set directly at the brake lever or the Bowden cable.
- The setting of the brakes is correct if the brake lever and Bowden cable have no clearance and the wheels turn without grinding.



Safety Notes

- Do not hang any bags on the handles.
- Use the operating brake when using the rollator on uneven paths.
- Only use the rollator on horizontal, solid ground.
- The rollator may tilt backwards if you lean on it too strongly.
- Clothing or parts of the body may get jammed when folding the Rollator XXL together.
- Please remember the cushion parts subjected to direct sunlight heat up and may cause injury to the skin contact. Cover these parts or protect the rollator from sunlight.

Cleaning

Cleaning and disinfection should be carried out at regular intervals (essential if the user changes). Use mild soap suds without additives for cleaning. Use conventional disinfectants for disinfection. Do not use steam jet units or any scouring or caustic cleaning agents!

Maintenance

The Rollator XXL is maintenance-free. If you notice failing of the brakes, stiffness of the wheels or other functional impairments, the Rollator must be given to a specialist trader for servicing.

Scope of delivery

- Rollator XXL
- Shopping basket
- Back rest
- Instructions for Use

Guarantee

The guarantee lasts 24 months and covers all defects of the product which are verifiably caused by material or manufacturing errors.

Technical Data

Maximum added weight:	200 kg / 3 kg shopping basket
Empty weight:	12.6 kg incl. shopping basket
Total width:	710 mm
Total depth:	730 mm
Total height:	820 – 925 mm
Turning radius:	1360 mm
Distance between handles:	640 mm
Seat height:	540 mm
Adjustments:	Push handle: 820-920 mm (adjustable in 5 steps)
Tires:	Ø 200 x 30 mm, puncture-proof

**Rollator XXL et
Rollator XXL Arthritique
Mode d'emploi**



Reutäckerstrasse 12
D-76307 Karlsbad-Ittersbach
Tél. +49 (0) 7248/ 9186 - 0
Fax. +49 (0) 7248/ 9186 – 86
info@dietz-reha.de



Rollator XXL et Rollator XXL Arthritique
Mode d'emploi version 4.0.0
Stand 03/2015 _ LW

Généralités

La conformité selon la directive CE 93/42 relative aux dispositifs médicaux est déclarée pour le Rollator XXL et le Rollator XXL Arthritique (non désignés ci-après) décrit ici.

Ce mode d'emploi fait partie intégrante de la livraison.

L'utilisateur doit le conserver à portée ; en cas de revente du produit, il doit être transmis avec le produit. Sous réserve de modifications dues à des perfectionnements techniques par rapport au modèle décrit dans ce mode d'emploi. Toute reproduction, traduction ou autre diffusion intégrale ou partielle – quelle qu'en soit la forme – requiert l'approbation écrite du fabricant. Le droit d'auteur est détenu par le fabricant. Ce mode d'emploi ne fait pas l'objet d'un service d'actualisation. Vous obtiendrez la version respectivement actuelle auprès de nous.

Indication et usage conforme

Le Rollator XXL est destiné aux personnes à mobilité réduite ayant un poids corporel max. de 200 kg ; il s'agit d'un dispositif d'aide à la marche pouvant également, dans une moindre mesure, servir de siège pour de brefs moments de repos. Le panier métallique suspendu sous le liège est conçu pour déposer et transporter des objets ou marchandises. Le Rollator XXL doit être uniquement utilisé sur des surfaces fermes et planes. L'emploi du Rollator à d'autres fins, notamment comme escabeau ou pour le transport de lourdes charges, constitue un usage non conforme et est dangereux !

Mise en place / Dépliage du Rollator

- Positionnez le Rollator devant vous dans le sens de la marche.
- Actionnez le frein d'immobilisation.
- Tenez le Rollator d'une main par la poignée.
- De l'autre main, appuyez sur le siège vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche nettement. Fixez le dossier.
- Accrochez le panier au cadre par devant.




Pliage du Rollator

- Décrochez le panier du cadre.
- Positionnez le Rollator devant vous dans le sens de la marche et actionnez les freins d'immobilisation.
- Tenez le Rollator d'une main par la poignée.
- De l'autre main, détachez le siège de son ancrage en tirant d'un coup sec.
- Maintenant, tirez le Rollator complètement vers vous.
- Pour ranger le Rollator, vous pouvez démonter le dossier et les poignées.



Réglage des poignées de poussée


- Actionnez d'abord le frein d'immobilisation.
- Desserrez le vissage et retirez complètement la vis de fixation.
- Positionnez les poignées de poussée à la hauteur correcte (conseil : les poignées de poussée doivent de préférence se trouver à hauteur de l'articulation du poignet).
- Après cela, remplacez fermement les vis de serrage et serrez avec l'écrou à molette.

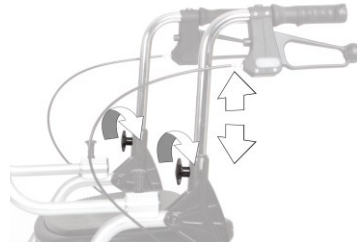

Veillez à ce que la vis s'enfonce intégralement dans le trou. Pour ranger le Rollator, vous pouvez également retirer complètement les poignées du cadre.

Réglage de l'appui ante-brachial


Veillez suivre les instructions de réglage de hauteur des poignées pour celui de l'appui ante-brachial.

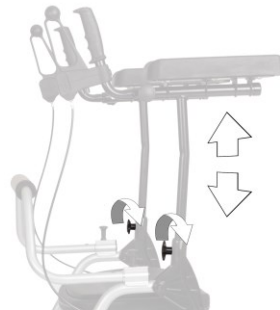

Réglage de la longueur de poignée

La longueur de poignée est graduellement réglable.

- Actionnez tout d'abord le frein d'immobilisation.
- Dévissez la vis de fixation jusqu'à pouvoir la retirer complètement.
- Positionnez les poignées sur la longueur que vous estimez confortable.
- Remplacez ensuite la vis de fixation et serrez-la à l'aide de l'écrou en étoile.

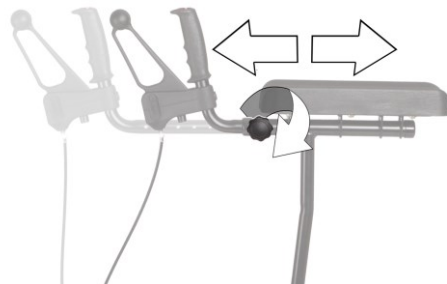

Fixation du dossier

- Tirez d'abord les goupilles à ressort vers le haut en les tournant légèrement pour qu'elles libèrent le blocage.
- Poussez le dossier dans les trous.
- Actionnez maintenant les goupilles à ressort de telle sorte qu'elles s'enclenchent complètement.
- Pour le démontage, procédez dans l'ordre inverse.

Pour ranger le Rollator, vous pouvez également ranger le dossier séparément.



Frein de service et d'immobilisation

- Le frein est utilisé comme frein de service (lorsque vous poussez le Rollator) en tirant la manette de frein vers le haut.
- En poussant la manette vers le bas, le frein est utilisé comme frein d'immobilisation (pour stationner le Rollator).



Assurez-vous avant chaque utilisation que le frein de service et d'immobilisation est réglé correctement et fonctionne parfaitement.

Réglage du frein

- L'efficacité du frein peut être réglée directement sur la manette de frein ou sur le câble sous gaine.
- Le frein est correctement réglé lorsque les manettes de frein et les câbles sous gaine ne présentent aucun jeu et que les roues tournent sans aucun bruit de frottement.



Consignes de sécurité

- Ne pas suspendre de sac aux poignées.
- Lors de l'utilisation sur des chemins en pente, utilisez le frein de service.
- Utiliser le Rollator uniquement sur des surfaces planes, horizontales et fermes.
- Lorsque l'utilisateur s'appuie fortement sur les poignées, le Rollator risque de basculer vers l'arrière.
- Lors du pliage du Rollator XXL, risque de coincement de vêtements ou de parties corporelles.
- Veuillez observer que les parties rembourrées exposées aux rayons du soleil se réchauffent fortement et peuvent entraîner des lésions cutanées en cas de contact avec la peau. Pour cette raison, couvrez ces parties ou protégez le Rollator contre les rayons solaires.

Nettoyage

Le nettoyage et la désinfection du rollator doivent être effectués à intervalles réguliers (ils sont impératifs en cas de changement d'utilisateur). Pour le nettoyage, utilisez un savon doux sans additifs abrasifs. Pour la désinfection, vous pouvez utiliser des désinfectants d'usage courant. N'utilisez jamais d'appareils de nettoyage à jet de vapeur ni de produits chimiques agressifs ou caustiques pour le nettoyage!

Maintenance

Le Rollator XXL ne nécessite aucune maintenance. Si vous constatez un affaiblissement de l'efficacité des freins, un mauvais roulement des roues ou d'autres défauts de fonctionnement, veuillez confier le Rollator à un revendeur spécialisé pour la remise en état.

Contenu de la livraison

- Rollator XXL ou Rollator Arthritique
- Panier
- Dossier
- Mode d'emploi

Garantie

Le délai de garantie est de 24 mois et couvre tous les vices du produit incontestablement dus à un défaut de matériau ou de fabrication.

Données techniques

Charge max. :	200 kg / panier : 3 kg
Poids à vide :	12,6 kg avec panier
Largeur totale :	710 mm
Profondeur totale :	730 mm
Hauteur totale :	820 – 925 mm
Rayon de braquage :	1360 mm
Écartement entre les poignées :	640 mm
Hauteur du siège :	540 mm
Réglages :	Poignée : 820 – 920 mm (réglage sur 5 crans)
Pneus :	∅ 200 x 30 mm, increvables

Rollator XXL en de Rollator XXL met armsteunen voor mensen met artritis

Gebruikshandleiding



Algemeen

Voor de rollator XXL en de rollator XXL met armsteunen voor mensen met artritis (onderstaand niet verder genoemd) die hier staan beschreven, is de conformiteit volgens de EG-richtlijn 93/42 voor medische producten verklaard. Deze gebruikshandleiding is onderdeel van het leveringspakket. Deze moet binnen handbereik van de gebruiker blijven en blijft ook bij het doorgeven van het product erbij. Wijzigingen als gevolg van technische verder-ontwikkelingen i.v.m. de weergegeven uitvoering in deze handleiding behouden wij ons voor. Nadrukken, vertalingen en verveelvoudiging in elke vorm, ook gedeeltelijk, hebben de schriftelijke toestemming van de fabrikant nodig. De fabrikant behoudt het auteursrecht. Deze gebruikshandleiding is aan geen enkele wijzigingsservice gebonden. De telkens actuele stand hoort u van ons.

Indicatie en toepassingsdoel

De Rollator XXL is voor personen tot max. 200 kg die in hun bewegingen beperkt zijn en dient als bewegingshulp en beperkt ook als zitgelegenheid voor tijdelijke pauzes. De ijzeren mand die onder het zitvlak is ingehangen, is voorzien als draagelement en voor het vervoer van voorwerpen of producten. De Rollator XXL mag alleen op een stevige en vlakke ondergrond worden gebruikt. Het gebruik voor andere doeleinden, vooral het gebruik als uitklimhulp of voor het vervoer van zware lasten is niet doelgericht en gevaarlijk!

Opstellen / uitvouwen van de rollator

- Plaats de rollator in rijrichting vóór u.
- Bedien de parkeerrem.
- Houd de rollator met één hand aan de handgreep.
- Druk met de andere hand de stoel naar beneden totdat deze voelbaar in klikt.
- Hang de mand van voren aan het frame erin.




De rollator invouwen

- Pak de mand van het frame af.
- Plaats de rollator in rijrichting voor u en bedien de parkeerremmen.
- Houd de rollator met één hand aan de handgreep.
- Maak met de andere hand met een ruk uit de verankering de stoel los.
- Trek nu de rollator helemaal naar u toe.
- Om de rollator te verplaatsen, kunt u de rugleuning en de duwgrepen demonteren.



Duwgreep instellen


- Bedien eerst de parkeerrem.
- Maak de schroefverbinding los en pak de bevestigingsbout er helemaal uit.
- Plaats de duwgrepen op de juiste hoogte (aanbevolen: De duwgrepen moeten op de hoogte van de pols zitten).
- Daarna moeten de bevestigingsbouten er weer in worden gezet en met de stergreepmoer worden vastgedraaid.

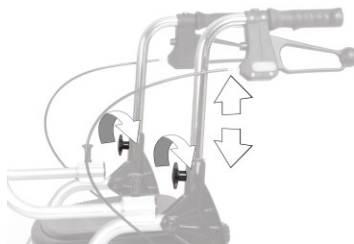

Let erop dat de bout volledig in de boring wegvallt.
Om de rollator te verbergen, kunt u de duwgrepen volledig uit het frame halen.

Artritis-steunen instellen


Voor de hoogteverstelling van de armsteunen voor mensen met artritis dient u zoals bij het instellen van de schuifhandgrepen als volgt te werk te gaan.

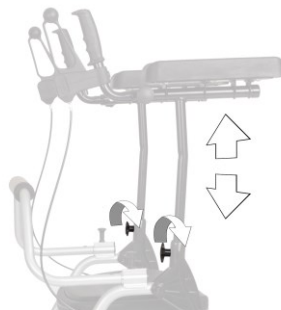

Breedte van de handgreep instellen

De breedte van de handgreep kan rapsgewijze worden ingesteld.


- Bedien als eerste de parkeerremmen.
- Maak de schroefverbinding los en haal de bevestigingsbouten er helemaal uit.
- Positioneer de handgrepen in een zodanige handgreep-breedte die voor u aangenaam is.
- Daarna moeten de bevestigingsbouten er weer ingezet worden en met de stermoer worden vastgedraaid.

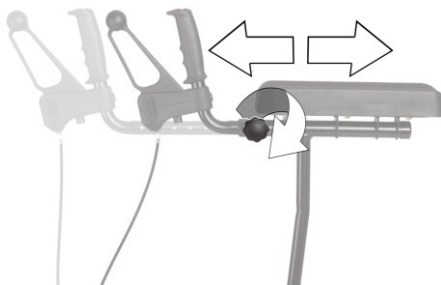

Rugleuning bevestigen

- Trek eerst de spansluiting met een kleine draai naar boven zodat de vergrendeling wordt vrijgegeven.
- Schuif de rugleuning in de boringen.
- Bedien nu de spansluitingen zodat deze volledig in klikken.
- Bij de demontage gaat u in omgekeerde volgorde te werk.

Om de rollator te verplaatsen, kunt u de rugleuning ook apart opbergen.

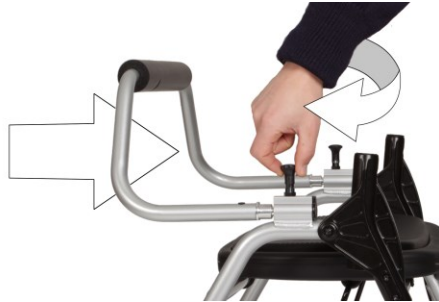

Bedienings- en parkeerrem

- De rem wordt als bedieningsrem (bij het duwen), door de bedieningshendel van de rem naar boven te trekken, gebruikt.
- Door de hendel naar beneden te drukken, wordt de rem als parkeerrem (bij het parkeren) gebruikt.



Let erop dat de bedrijfs- en parkeerrem vóór elke ingebruikneming juist is ingesteld en perfect werkt.

Instelling van de rem

- De remwerking kan rechtstreeks met de bedieningshendel van de rem of met de Bowdenkabel worden ingesteld.
- De rem is juist ingesteld wanneer de bedieningshendels van de rem en ook de bowdenkabels geen speling vertonen en de wielen zonder schurende geluiden kunnen draaien.



Veiligheidsinstructies

- Hang geen tassen aan de grepen.
- Wanneer u de rollator op hellende wegen gebruikt, moet u de bedieningsrem gebruiken.
- Gebruik de rollator alleen op een vlakke horizontale en stevige ondergrond.
- Wanneer zwaar op de handgrepen wordt geleund, kan de rollator naar achteren kantelen.
- Wanneer de Rollator XXL in elkaar wordt geklapt, kunnen kledings- of lichaamsdelen worden ingeklemd.
- Let erop dat kussendelen die aan directe zonnestraling bloot staan, kunnen opwarmen en bij contact verwondingen aan de huid kunnen veroorzaken. Dek deze delen daarom af of bescherm de rollator tegen instraling van de zon.

Reiniging

Het reinigen en desinfecteren moeten in regelmatige afstanden (beslist noodzakelijk wanneer er een andere gebruiker komt) worden uitgevoerd. Voor het reinigen dient u zachte zeepsop zonder schurende toevoegingen te gebruiken. De desinfectie kunt u met middelen die gebruikelijk op de markt zijn, uitvoeren. Gebruik geen stoomstraalapparaten en geen schurende of irriterende reinigingsmiddelen!

Onderhoud

De Rollator XXL is onderhoudsvrij. Wanneer u merkt dat het remmen minder gaat, de wielen zwaarder lopen of andere beperkingen in het functioneren ontstaan, dan moet de rollator voor reparatie naar een vakkundige werkplaats worden gestuurd.

Leveringsinhoud

- Rollator XXL
- inkoopmand
- rugleuning
- gebruikshandleiding

Garantie

De vrijwaringstermijn is 24 maanden en heeft betrekking op alle gebreken van het product die aantoonbaar op materiaal- of fabrikantfouten terug te herleiden zijn.

Technische Daten

Maximale extra lading:	200 kg / 3kg inkoopmand
Leeg gewicht:	12,6 kg inclusief inkoopmand
Totale breedte:	710 mm
Totale diepte:	730 mm
Totale hoogte:	820 – 925 mm
Keerradius:	1.360 mm
Afstand tussen de handgrepen:	640 mm
Zithoogte:	540 mm
Verstellingen:	Duwgreep: 820 - 920 mm (5-voudig in te stellen)
Banden:	Ø 200 x 30 mm, beveiligd tegen lekkage